

ReNew™ Dryer & Freshener User's Guide
(Hearing Aid Dryer & Battery Tester)

Thank you for your purchase of ReNew Dryer & Freshener; please read this user's guide carefully before use and keep it for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING – When using electric appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read all the instructions before using the appliance.
2. To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when an appliance is used near children.
3. Do not look directly at the two UV lights located on the front corners of the drying chamber.
4. Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
5. Do not use outdoors. Do not use near water.
6. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
7. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Unplug from outlet when not in use and before servicing or cleaning.
9. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.


5. Both indicators turn off automatically at the end of the drying cycle.

(Note: Ultra-Violet (UV) light inhibits bacteria growth. "REFRESH" button controls the two UV lights in the chamber.)

6. Remove hearing aids and wipe off any dried wax.

Battery Test:

1. Place a battery against battery tester terminals. Make sure the smaller round battery contact (-) is placed on the gold disc.
2. Press the battery so that its body (+) is pressed against the vertical gold terminal.
3. Battery capacity is indicated by the number of indicators that light up. 4 or 5 indicators means the battery has good capacity remaining. 1 or 2 indicators means the battery has marginal capacity and should be replaced soon.
4. Before testing a new battery, remove battery tab and wait two minutes for the battery voltage to stabilize.

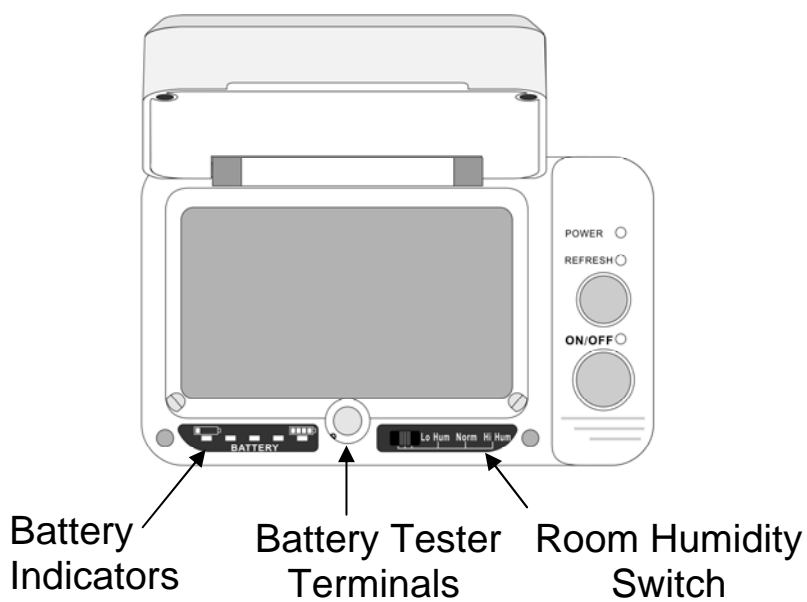

Drying Cycle:

1. Plug AC adapter into the unit and wall outlet. Verify Power indicator is ON.
2. Set Room Humidity switch for the following drying times:
 - “Low Humidity” = 2 hrs.
 - “Normal Humidity” = 4 hrs.
 - “High Humidity” = 8 hrs.
3. Open hearing aid battery cover to expose the battery for drying also. Place hearing aids in the chamber and close the cover.
4. Press ON / OFF button to start the drying cycle. Both ON / OFF and REFRESH indicators light up.

Caution: Do not look directly at the two UV lights on the front corners of the chamber.

ReNew Specifications @ 25°C ambient:

1	Chamber temp (measured @5 mm above center)	45 +/- 5°C
2	UV light	385 nm; < 100mw
3	Drying cycle timer	2 hr, 4hr, 8hr
4	Moisture evaporation rate (tested with water in a 2 mm diameter plastic tube)	Evaporate 18 mm ³ of water after 4 hours of drying at 60% R.H.
5	Battery voltage indicators	5
6	Switching AC adapter input	100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz
7	Switching AC adapter output	12VDC, 1000MA
8	Redundant over-temp control	PTC and thermostat
9	Operating temp	0 to 40°C
10	Storage Temp	-10 to 50°C
10	Size (mm)	148x89x51 (5.8"x3.5"x2")
11	Weight (gm)	430 (15 Oz)

Warranty Service Information

ReNew comes with one-year limited warranty. We warrant during this warranty period, from the date of purchase, to the original consumer, ReNew to be free from defects in materials and workmanship under intended home use. In the event that ReNew fails to function properly within one year of original purchase due to defects in materials or workmanship, return the unit (freight prepaid) with proof of purchase (sales receipt or packing slip, no exceptions) to Serene Innovations. Serene Innovations will either repair or replace the unit (with a refurbished unit or unit of equal condition) and return it to you (using UPS/USPS ground shipping) at no cost to you if the unit is returned within 30 days of purchase. If the unit is returned after 30 days of purchase but within the warranty period, there will be a warranty handling charge of \$9.95 for each return.

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights that vary from state to state.

ReNew™ is a trade mark of Serene Innovations, Inc.

Serene Innovations, Inc.
14615 Carmenita Road, Norwalk, CA
Tel: 562 407 5400 www.sereneinnovations.com

ReNew™ Séchoir / rafraîchisseur d'aides auditives

Guide de l'utilisateur

(Séchoir d'aides auditives et testeur de piles)

Merci d'avoir acheté ReNew Séchoir / rafraîchisseur; Veuillez lire attentivement ce guide avant utilisation et le conserver pour référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT – Lors de l'utilisation d'appareils électriques des précautions de base devraient toujours être suivies, incluant celles-ci:

1. Lire entièrement les instructions avant l'utilisation.
2. Pour réduire les risques de blessures, la supervision d'un adulte est conseillé, si utilisé près d'un enfant.
3. Ne pas regarder directement les deux lampes UV situées dans les coins avant de la chambre de séchage.
4. N'utilisez que des accessoires vendus par le fabricant.
5. Ne pas utiliser à l'extérieur ou près de l'eau.
6. Pour débrancher l'appareil, mettre tous les contrôles à "OFF" et ensuite débrancher le de la prise murale.
7. Ne jamais tirer sur le fil, tirez plutôt sur la prise.
8. Lorsqu'il ne sert pas, débranchez toujours l'appareil ainsi qu'avant l'entretien ou le nettoyage.
9. Ne jamais faire fonctionner un appareil ayant le fil, ou la prise électrique endommagés, ou suite à une panne de celui-ci, si il a été échappé ou endommagé de quelque façon. Retournez l'appareil au centre de service autorisé le plus près de chez vous pour évaluation, réparation, ajustement électrique ou mécanique.


5. Les deux voyants lumineux s'éteindront automatiquement lors de la fin du cycle de séchage.

(Note : La lumière ultra-violette (UV) réduit la croissance des bactéries. La touche REFRESH contrôle les deux lampes UV dans la chambre de séchage)

6. Retirez les prothèses et essuyez l'excès de cérumen

Test d'une pile:

1. Placez une pile contre les terminaux du testeur. Assurez-vous que le plus petit coté arrondi (-) soit placé sur le disque doré.
2. Poussez sur la pile de façon a ce que le coté (+) touche au terminal vertical doré.
3. La force de la pile est indiquée par le nombre de lignes allumées. 4 ou 5 lignes indiquent une pile ayant encore un bon voltage. 1 ou 2 lignes indiquent que la pile est faible et sera bientôt à remplacer.
4. Avant de tester une pile neuve, retirez la languette et attendez deux minutes afin de laisser le voltage de la pile se stabiliser.

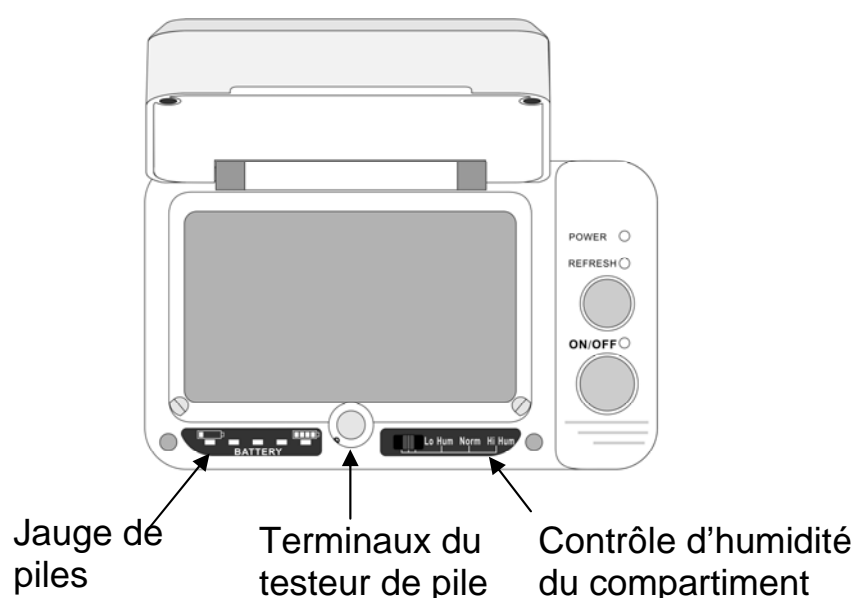

Cycles de séchage:

1. Branchez l'adaptateur CA à l'appareil et l'autre bout dans une prise murale. L'indicateur de courant devrait s'allumer
2. Ajustez le réglage d'humidité du compartiment selon le temps de séchage.
"Low Humidity" = 2 heures
"Normal Humidity" = 4 heures
"High Humidity" = 8 heures
3. Ouvrir la porte de la pile de l'aide auditive pour la sécher également. Placer les prothèses dans le compartiment de séchage et refermer son couvercle
4. Appuyez sur la touche ON/OFF pour démarrer le cycle de séchage. Les deux voyant lumineux ON/OFF et REFRESH s'allumeront. **Attention: Ne pas regarder directement les deux lampes UV dans les coin avant de la chambre de séchage.**

ReNew ; Spécifications @ 25°C air ambiant:

1	Températ. chambre (mesure à 5 mm au dessus du centre)	45 +/- 5°C
2	Lumière UV	385 nm; < 100mw
3	Minuterie de séchage	2 h, 4h, 8h
4	Taux d'évaporation d'humidité (testé avec de l'eau dans un tube de plastique de 2 mm)	Évapore 18 mm ³ d'eau après 4 heures de séchage à 60% H.R.
5	Indicateurs de voltage de la pile	5
6	Entrée adaptateur CA	100 à 240 VAC, 50 / 60 Hz
7	Sortie adaptateur CA	12VDC, 1000MA
8	Protection contre surchauffe	RPT et thermostat
9	Températ. de fonctionnement	0 à 40°C
10	Températ. entreposage	-10 à 50°C
10	Dimension (mm)	148x89x51 (5.8"x3.5"x2")
11	Poids (g.)	430 (15 On.)

Information sur les garanties de service

ReNew vient avec une garantie limitée d'un an. Nous garantissons durant cette période, à partir de la date d'achat, à l'acheteur original, que ReNew est exempt de tous défauts matériels ou de main d'œuvre dans le cadre d'un usage personnel. Au cas ou ReNew ne fonctionnerais pas correctement durant la première année suivant l'achat, dû a un défaut matériel ou de main d'œuvre, retournez l'appareil (à nos frais) avec la prevue d'achat (reçu de caisse, bon de livraison ou autre) à Serene Innovations. Serene Innovations réparera ou remplacera l'appareil (avec un appareil réusiné ou de qualité égale) et vous le retournera (par UPS/USPS postes USA) sans frais si le retour survient dans les premiers 30 jours suivant l'achat. Après 30 jours, mais toujours sous la garantie d'un an, des frais de manutention de 9,95\$ US seront applicables à chaque retour.

Cette garantie a cours légal, les recours légaux peuvent varier selon la législation locale.

ReNew™ est une marque de commerce de Serene Innovations, Inc.

Serene Innovations, Inc.

14615 Carmenita Road, Norwalk, CA

Tél: 562 407 5400 www.sereneinnovations.com